




**BYCROSS**

Dispositivo de Aterectomia Rotacional & Trombectomia



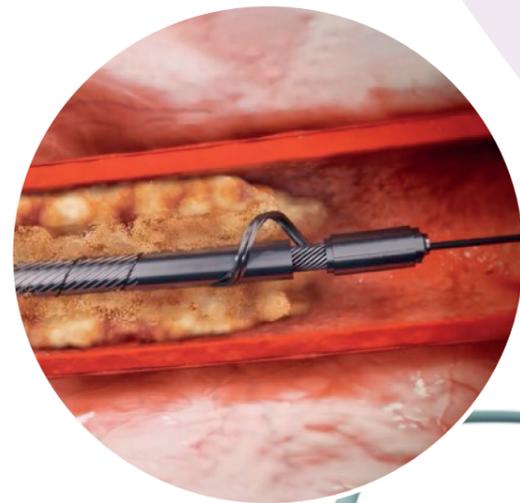

Configuração exclusiva da ponta do cateter para remoção de material calcificado

Não há necessidade de passar a oclusão com fio-guia

Configuração rápida e fácil

Não requer equipamento

## ROTATIONAL ATHERECTOMY & THROMBECTOMY DEVICE

BYCROSS é um dispositivo de aterectomia rotacional bidirecional e trombectomia rotacional 6F que é inserido no sistema vascular arterial periférico por meio de um fio-guia e uma bainha introdutora para restaurar vasos cronicamente ocluídos.

- O cateter BYCROSS consiste em uma haste coaxial, flexível e rotativa com ponta expansível. O dispositivo BYCROSS é funciona por bateria. O material calcificado é aspirado através de uma bomba integrada e descartado em uma bolsa coletora.



ASSISTA AO VÍDEO





TECMEDIC Com. Prod. Médicos Ltda.

Rua Brasílio Cuman, 566, São Braz  
Curitiba, PR, Brasil, CEP: 82315-010  
Tel: +55 41 3233-7887  
www.tecmedic.com.br



BYCROSS é uma marca registrada de TARYAG Medical Ltd.

#### Alemanha

plus medica GmbH & Co. KG  
Willstätterstraße 13  
40549 Düsseldorf  
Germany  
Tel: +49 211 54 59 08 80  
kundenservice@plusmedica.de  
info@plusmedica.de  
www.plusmedica.de

#### Áustria

plus medica GmbH  
Klingerstraße 9  
2353 Guntramsdorf  
Austria  
Tel: +43 1 50 32 585  
kundenservice@plusmedica.at  
info@plusmedica.at  
www.plusmedica.at

#### Suíça

plus medica AG  
Oberwilerstraße 3  
8442 Hettlingen  
Switzerland  
Tel: +41 52 316 44 36  
kundenservice@plusmedica.ch  
info@plusmedica.ch  
www.plusmedica.ch

#### Suécia

plus medica Nordic AB  
Lövsögsvägen 12  
70376 Örebro  
Sweden  
Tel: +46 70 588 70 91  
gzivkovic@plusmedica.se  
www.plusmedica.se



#### TARYAG Medical Ltd.

14 Ha'Ilan St. Or Akiva,  
3065101 Israel  
Tel: +972.4.6776929  
Fax: +972.77.3180728  
info@taryag-medical.com  
www.taryag-medical.com



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Art. No.	Descrição	Qtd.
BC213-50	BYCROSS 6F 50CM	1
BC213-70	BYCROSS 6F 70CM	1
BC213-95	BYCROSS 6F 95CM	1

### Em combinação com outros dispositivos/não incluídos:

Dispositivo	Descrição
Fio Guia	Fio-guia padrão de 0,035" (0,89 mm) em comprimento apropriado
Seringa	Seringa Luer Padrão
Bainha Introdutora	Bainha reforçada 6F / 7F com comprimento apropriado